

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A MESEI DE MASAJ



INFORMARE GENERALĂ:

- deschideți cu atenție cutia pentru a evita deteriorarea pieselor interne, vă recomandăm să puneți piesele mici într-un recipient mic pentru a nu se pierde.
- verificați dacă pachetul conține toate piesele și dacă niciuna dintre ele nu este deteriorată
- în cazul în care asamblați masa cu o piesă defectă, iar aceasta este apoi deteriorată, garanția nu poate fi aplicată
- nu încărcați niciodată masa cu o greutate mai mare decât cea recomandată în descrierea produsului
- nu săriți niciodată pe masă, pentru a nu o destabiliza și a o deteriora
- utilizați întotdeauna masa extensibilă numai în scopul pentru care a fost conceput, adică ca masa extensibilă portabilă de masaj.
- verificați periodic dacă cablurile nu sunt uzate și dacă șuruburile sunt suficient de strânse
- nu folosiți detergenți pe bază de alcool pentru a curăța suprafața, deoarece aceștia pot deteriora suprafața, utilizați doar apă cu săpun blând și o cârpă moale pentru a curăța suprafața și apoi ștergeți suprafața cu o cârpă uscată.
- înainte de a vă urca pe masă, asigurați-vă că toate cele 4 picioare sunt ferme și drepte și că suprafața superioară este la aceeași înălțime peste tot.

PROCEDURA DE MONTAJ:

PASUL 1.: Deschideți cu grijă cutia și așezați conținutul pe o parte a patului, așa cum se arată în imagine.




PASUL 2: Rotiți șuruburile 1/2 tur, așa cum se arată în imaginea 1. Apoi înșurubați cele 7 șuruburi rămase (8 în total în pachet). Apoi atașați balamalele așa cum se arată în imaginea următoare.



AVERTISMENT:

Vă rugăm să rețineți că este esențial ca șezlongul să fie înclinat la 90° atunci când se fixează balamalele (exact așa cum se arată).

PASUL 3: La unghiul corect (a se vedea imaginea), atașați cablurile la masă. Apoi, așezați-o pe podea și asigurați-vă că frânghiile sunt poziționate în unghiuri drepte corecte.

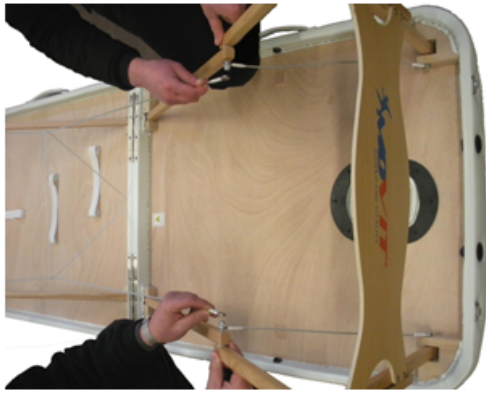

PLIEREA ȘI DESCHIDEREA MESEI:



UTILIZAREA ACCESORIILOR:

Tetieră - tetiera este în formă de semilună, tetiera poate fi ajustată cu ușurință la o înălțime confortabilă și la un unghi de înclinare cu ajutorul mânerului.



SUPPORT AJUSTABIL PENTRU COATE - acesta este un dispozitiv util pentru susținerea coatelor în timpul masajului. Fixați suportul așa cum se arată și apoi reglați cureaua în poziția corectă.



TETIERĂ LATERALĂ – tetieră suplimentară care se potrivește în găurile de pe părțile laterale ale mesei

REGLAREA ÎNALȚĂMII - înălțimea corectă a mesei depinde de mărimea maseurului și de tehnica de masaj.

ÎNTREȚINEREA ȘEZLONGULUI:

- îngrijire zilnică: îndepărtați murdăria reținută în timpul zilei cu apă cu săpun delicat și uscați cu o cârpă moale, fără scame
- dezinfecție: dezinfectați suprafața, după caz, cu dezinfectanți pe bază de izopropanol.
- îndepărtarea murdăriei: petele minore pot fi îndepărtate cu un detergent neabraziv, apoi clătiți bine cu apă și uscați cu o cârpă, petele mai mari vor necesita o curățare profesională
- păstrați masa de masaj într-un mediu uscat!